

# DISPOZITIVE PENTRU PROTEZARE STOMII

## A) SISTEM STOMIC UNITAR

### Colostomie/ileostomie » Sistemul unitar » Gama MC/PC 2000

#### ***Caracteristici speciale:***

- Adezivul hidrocoloid asigura o lipire ferma, de lunga durata, protejand tegumentul peristomal, fiind hidrocoloid similar celui folosit in ulcere crurale sau leziunile de decubit;
- Filtru de carbon activ pentru eliminarea gazelor si retinerea mirosurilor neplacute;



- Clip individual de inchidere, eliminand astfel riscul ruperii acestuia prin utilizari repetate;
- Materialul plastic laminat multistratificat nu fosneste si nu permite trecerea mirosurilor neplacute;
- Materialul textil netesut aflat pe spatele sacilor asigura absorbtia transpiratiei, o buna respiratie a tegumentului si inlatura riscul iritatiilor.



#### ***Produse:***

##### **Saci colostomie/ileostomie cu evacuare**

- Opaci (decupabili intre 15-60 mm)
- Transparenti (decupabili intre 15-60 mm)
- Saci folositi postoperator sau in stomele pe bagheta (decupabili intre 10-80mm)





##### **Saci colostomie/ileostomie fara evacuare**

- Opaci (decupabili intre 15-60 mm)

## Colostomie/ileostomie » Sistemul unitar » Gama Alterna

### Caracteristici speciale:

- Adezivul ofera o protectie superioara tegumentului, fiind **indicat cu predilectie persoanelor sensibile si predispuse la alergii**;
- **Structura in spirala** a diverselor tipuri de hidrocoloid adeziv: stratul alb asigura absorbtia umezelii mentinand tegumentul in conditii normale, iar stratul brun inchis confera adeziunea si siguranta necesare unei purtari indelungate;
- **Alernanta in timp a celor doua structuri de hidrocoloid pe tegument:** la schimbarea flansei vechi cu una noua, locul stratului alb va fi luat de stratul brun datorita acestei structuri unice in spirala a celor doua tipuri de hidrocoloid;
- Design nou ca forma si dimensiuni, care asigura **intimitate, confort si discretie maxima**;
- Filtrul, datorita structurii multistratificate si membranei semipermeabile cu care este acoperit, nu poate fi blocat de materiile fecale sau distrus de umezeala; se asigura astfel filtrarea efectiva a flatulentelor.

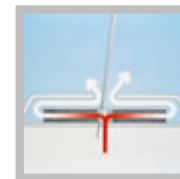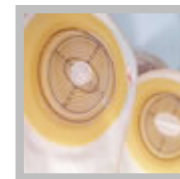


### Produse:

#### Sistem unitar pentru colostomie si ileostomie

##### Saci colostomie/ileostomie cu evacuare

- Opaci midi (decupabili intre 10-55mm)
- Opaci maxi (decupabili intre 10-70mm)

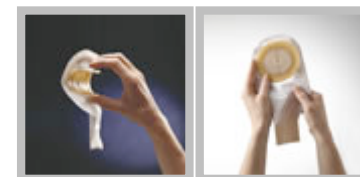

##### Saci colostomie/ileostomie fara evacuare

- Opaci maxi (decupabili intre 20-55mm)
- Mini Cap (solutie foarte discreta, folosit cu/fara irigator, decupabil intre 20-55mm)



## Urostomie » Sistemul unitar » Gama Alterna

### Caracteristici speciale:

- Adezivul ofera o protectie superioara tegumentului: alternarea in spirala a diverselor tipuri de adeziv asigura protectia tegumentului si siguranta pacientului.  
Pentru **sistemul unitar**: sacii se schimba frecvent, de aceea este important sa nu se irite tegumentul la indepartarea sacului. Structura in spirala prin alternarea tipurilor de adeziv asigura schimbarile frecvente, stratul brun deschis permitand absorbtia umezelii si mentinand in conditii normale tegumentul, iar stratul brun inchis permitand adeziunea, dar si indepartarea usoara a sacului.
- Sistemul de prindere a sacului de flansa se foloseste usor si confera siguranta maxima;
- Valva anti-reflux blocheaza revenirea urinei in stoma, eliminand riscul infectiei urinare si iritarea tegumentului.
- Fata moale de material textil netesut asigura discretia
- Valva de evacuare a urinei imbunatatita este igienica, sigura si ideala pentru persoane cu dexteritate redusa
- Constructia sacului colector asigura evacuarea urinei pana “ la ultima picatura”




### Produse:

#### **Saci opaci, decupabili intre 10-55 mm**

- volum 150 ml, varianta midi;
- volum 375 ml, varianta maxi;

#### **Saci transparenti, decupabili intre 10-55 mm**

- volum 150 ml, varianta midi;
- volum 375 ml, varianta maxi;

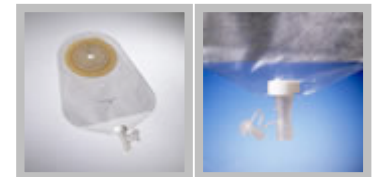


## B)- SISTEM STOMIC CU DOUA COMPONENTE

### Colostomie/ileostomie » Sistemul din două componente » Gama MC 2002

#### Caracteristici speciale:

- Adezivul ofera o protectie superioara tegumentului: flansa centrala din hidrocoloid special absoarbe umezeala si previne activ iritatiile din jurul stomei. Inelul periferic din material special microporos permite tegumentului sa respire in timp ce asigura securitate completa.
- In interiorul flansei **nu exista nici un fel de sant** care sa retina secretiile intestinale intre schimbarile sacului facute in mod igienic;
- Prin constructia unica a flansei cu un **inel flotant**, sacul colector se pozitioneaza usor, eliminandu-se presiunea exercitata pe abdomen la aplicarea acestuia.
- Flansa adeziva este subtire si flexibila, urmand miscarile corpului si sacului colector.
- Atasarea sacului colector pe flansa este foarte sigura, indepartarea lui fiind posibila numai prin actionarea « urechiusei » special prevazuta in acest scop.
- Clip individual de inchidere, eliminand astfel riscul ruperii acestuia prin utilizari repetate;
- Fata moale de material textil netesut asigura discretia;
- Materialul plastic laminat pluristratificat nu fosneste si nu permite trecerea mirosurilor neplacute

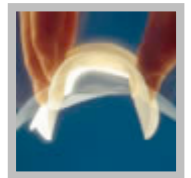

#### Produce:

##### Flanse

- Flansa (decupabila intre 10-60mm)
- Flansa (decupabila intre 35-60mm)



##### Saci


- Saci opaci cu/fara evacuare




## Colostomie/ileostomie » Sistemul din două componente » Gama Alterna

### Caracteristici speciale:

- **ADEZIVUL** - pentru **sistemul din 2 componente**, datorita faptului ca flansa se schimba mai rar, este necesara intretinerea in conditii optime a tegumentului periostomal, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa apara iritatii la indepartarea acesteia.
- Stratul alb de adeziv asigura absorbtia umezelii mentinand tegumentul in conditii normale, iar stratul brun confera adeziunea si siguranta necesare unei purtari indelungate. Structura particulara de dispunere in spirala a straturilor de adeziv este special indicata in purtarea indelungata. De asemenea, flansele pot fi prevazute si cu dispozitiv de prindere a centurii.
- Flansa adeziva este subtire si flexibila, urmand miscarile corpului si sacului colector.
- Inelul de inchidere a sacului la flansa este usor de folosit si asigura mentinerea sigura a flansei la sac permitand in acelasi timp, aplicarea si indepartarea sacului fara a crea presiune pe abdomen. Sunetul specific "Click" ne arata cand sacul este atasat ferm la flansa.
- Clip individual de inchidere, eliminand astfel riscul ruperii acestuia prin utilizari repetate;

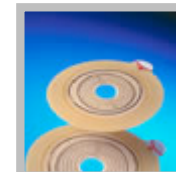

inchis

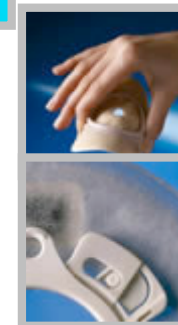

### **Produse:Sistem din 2 componente pentru colostomie si ileostomie**

#### **Flanse**

- Flansa cu urechiuse speciale de prindere a centurii (decupabila intre 10-60mm)
- Flansa pentru purtare indelungata (decupabila intre 15-5mm si inel de prindere 60 mm)

#### **Saci colostomie/ileostomie fara evacuare**

- Opac: cu inel de prindere 60 mm, varianta maxi

#### **Saci colostomie/ileostomie cu evacuare:**


- Opac: cu inel de prindere 60 mm, varianta maxi
- Transparent: cu inel de prindere 60



## Urostomie » Sistemul din două componente » Gama Uro 2002

### Caracteristici speciale:

- Adezivul ofera o protectie superioara tegumentului: flansa centrala din hidrocoloid special absoarbe umezeala si previne activ iritatiile din jurul stomei. Inelul periferic din material special microporos permite tegumentului sa respire in timp ce asigura securitate completa.
  - In interiorul flansei **nu exista nici un fel de sant** care sa retina urina intre schimbarile sacului facute in mod igienic;
  - Prin constructia unica a flansei prevazuta cu **un inel flotant**, sacul colector se pozitioneaza usor la sistemul din 2 componente ori de cate ori este necesara schimbarea igienica a acestuia, inlaturand astfel riscul unei presiuni suplimentare pe abdomenul pacientului si o manevrare mai usoara. Atasarea sacului colector pe flansa este foarte sigura, indepartarea lui fiind posibila numai prin actionarea “urechiusei” special prevazuta in acest scop.
  - Flansa adeziva este subtire si flexibila, urmand miscarile corpului si sacului colector.
- 
- Valva anti-reflux impiedica revenirea urinei in stoma, eliminand riscul infectiei urinare si iritarea tegumentului.
  - Sistemul de prindere a sacului de flansa se foloseste usor si confera siguranta maxima;
  - Fata moale de material textil netesut asigura discretia;
  - Materialul plastic laminat pluristratificat nu fosneste si nu permite trecerea mirosurilor neplacute
  - Constructia sacului colector asigura evacuarea urinei pana “ la ultima picatura”

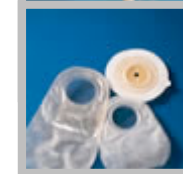

### **Produse:**


**Flanșe** - decupabile între 10-55 mm, cu inel de prindere 60 mm

**Saci transparenți** - volum 375ml, cu inel de prindere 60 mm, varianta maxi

## Urostomie » Sistemul din două componente » Gama Alterna

### Caracteristici speciale:

- **ADEZIVUL** - Pentru **sistemul din 2 componente**, datorita faptului ca flansa se schimba mai rar, este necesara intretinerea in conditii optime a tegumentului peristomal, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa apara iritatii la indepartarea acesteia.
- Stratul alb de adeziv asigura absorbtia umezelii mentinand tegumentul in conditii normale, iar stratul brun inchis confera adeziunea si siguranta necesare unei purtari indelungate. Structura particulara de dispunere in spirala a straturilor de adeziv este special indicata in purtarea indelungata. De asemenea, flansele pot fi prevazute si cu dispozitiv de prindere a centurii
- Flansa adeziva este subtire si flexibila, urmand miscarile corpului si sacului colector.
- Inelul de inchidere a sacului la flansa este usor de folosit si asigura mentinerea sigura a flansei la sac permitand in acelasi timp, aplicarea si indepartarea sacului fara a crea presiune pe abdomen. Sunetul specific "Click" ne arata cand sacul este atasat ferm la flansa.
- Valva anti-reflux impiedica revenirea urinei in stoma, eliminand riscul infectiei urinare si iritarea tegumentului.
- Valva de evacuare a urinei imbunatatita este igienica, sigura si ideala pentru persoane cu dexteritate redusa.

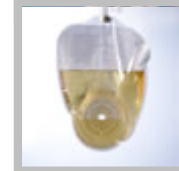

### Produse:

#### Flanșe

- **Flanșe cu dispozitiv de prindere a centurii:** decupabile între 10-55 mm, cu inel de prindere 60 mm
- **Flanșe pentru purtare indelungata:** decupabile între 15-55 mm, cu inel de prindere 60 mm

## Saci pentru urostomie

În funcție de preferința pacientului:

- **Opaci:** volum 375 ml, cu inel de prindere 60 mm, varianta maxi; acești saci se pot atăsa atât flanselor convexe, cât și flanselor pentru purtare îndelungată
- **Transparenti:** volum 375 ml, cu inel de prindere 60 mm, varianta maxi; acești saci se pot atăsa atât flanselor convexe, cât și flanselor pentru purtare îndelungată

## Produse » Stomii » Produse cosmetice

### Curățătorul Comfeel

Este o loțiune care curăță delicat și eficient tegumentul, calmându-l, hidratându-l și creând o senzație revigorantă. Resturile de adeziv sunt înlăturate eficient prin acțiunea isopropylalcoolului. Alantoină din compoziție favorizează procesul de vindecare a tegumentului afectat.

### Strip-paste

Etanșează și nivelează cicatricile, pliurile și cutele din jurul stomei sau fistulei, realizând o suprafață netedă pe care orice dispozitiv poate fi atașat ușor și sigur, prelungind astfel perioada de purtare a dispozitivului.



### Crema Barrier Comfeel

Este tratamentul ideal pentru tegumentul uscat sau iritat datorită acțiunii agresive a secrețiilor intestinale sau urinei, hrănindu-l și menținându-i valorile normale ale pH-ului.

### Crema Protact Conveen

Indicată pentru îngrijirea tegumentului din jurul stomei în cazul apariției unor răni, vezicule, pustule sau iritații. Are proprietăți sicative datorită oxidului de zinc conținut.

### Comfeel Film protector

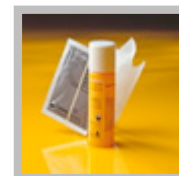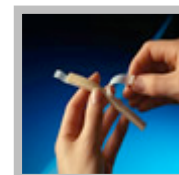



Formează prin aplicare un strat subțire protector semipermeabil, elastic și rezistent la apă care protejează tegumentul expus acțiunii agresive a secrețiilor intestinale și urinei.

### **Deodorant lichid Appliance Deodorant**

Deodorantul concentrat funcționează foarte eficient prin neutralizarea mirosurilor neplăcute, nu prin mascarea unui miros cu altul.



### **Filtru de carbon activ**

Suplimentar se poate folosi și un filtru de carbon activ care reține mirosurile neplăcute și permite eliberarea gazelor din sacul colector, în funcție de necesitățile individuale. Filtrul nu poate fi blocat de materiile fecale și se poate utiliza și în timpul băii.



### **Pasta Coloplast**

Asigură o sigilare sigură, realizând o suprafață netedă pe care orice pungă se atașează ușor și sigur, umplând cele mai adânci cute sau alte leziuni aflate în tratament.. Absoarbe umezeala, menținând tegumentul peristomal uscat, permițând astfel vindecarea tegumentului iritat.



### **Centura și flanșa pentru centură**

Prelungesc timpul de purtare • Extrasiguranță • Discrete, pentru că sunt subțiri • Lungimea se ajustează ușor • Suportă apa de spălare la 90°C • Se pot refolosi.



Sistemul se folosește foarte ușor: se atașează flanșa la sac, iar după aplicarea propriu-zisă a sacului se conectează centura.


# DISPOZITIVE PENTRU INCONTINENTA URINARA

## A) Produse » Incontinență urinară » Bărbați

### Condoamele urinare Conveen

**Condoamele Conveen** încorporează o exclusivă combinație între avantajele funcționale, comoditate, confort și economie, oferind avantaje de neegalat în ceea ce privește **siguranța și discreția**.

Dispozitiv extern pentru incontinența urinară, **condomul urinar** este disponibil în varianta 2 componente (condom propriu-zis și bandă adezivă individuală).

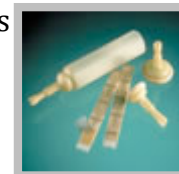

### Condomul urinar

- Este cel mai sigur dispozitiv pentru incontinență urinară, fiind disponibil în mai multe dimensiuni.




- Aplicat pe tegument poate fi rotit 90 de grade în orice direcție, pentru o mai ușoară direcționare a urinei, fără a bloca scurgerea acesteia.
- Sistemul de evacuare prevăzut cu antiștrangulare asigură scurgerea urinei fie că este înclinat sau răsucit, spre exemplu, în timpul somnului.
- Este fabricat dintr-un hidrocoloid de înaltă calitate, delicat pentru piele.




### Bandă adezivă individuală

Este o bandă dublu adezivă care se atașează delicat atât pe penis cât și pe condom.

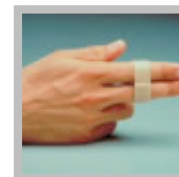

- Proprietățile adezivului permit sângelui să circule neîntrerupt prin penis, fie el în repaus sau în erecție, astfel eliminând presiunea dureroasă.
- Fabricat dintr-un material hidrocoloid delicat pentru piele, adezivul absoarbe umiditatea, oferind protecție împotriva iritațiilor sau macerării tegumentului.
- Mici variații ale locului de lipire a adezivului de la o aplicare la alta vor oferi pielii posibilitatea de a se refăce.
- Capetele libere ale hârtiei protectoare o fac ușor de îndepărtat de pe ambele părți ale adezivului, chiar și pentru persoane cu abilități limitate.

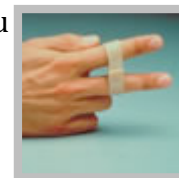

## Sacul colector de 1.500 ml

Sac colector de urină pentru **noapte**.


- Ideal pentru pacienții care sunt imobilizați la pat și cei care au nevoie de un sac cu o capacitate mai mare de colectare a urinei.
- Este prevăzut cu indicator pentru volum.
- Sacii colectori sunt prevăzuți cu vâlvă antireflux pentru a împiedica revenirea urinei, prevenind apariția infecțiilor urinare.



## Sacul colector de urină de 600 ml

Sac colector de urină de picior: când **discreția** este cea mai înaltă prioritate.

Are canale interioare ce distribuie urina oferind sacului o formă confortabilă, care se mulează discret în jurul piciorului și face ca punga să nu foșnească.

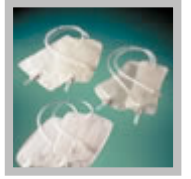

## B) Produse » Incontinență urinară » Femei

### Corecția incontinenței urinare de efort (stres) la femei prin benzile intravaginale "no touch" Swing-Band®

Acest dispozitiv medical, special creat pentru tratarea incontinenței urinare la femei, se aplică doar la indicația unui medic specialist: urolog, ginecolog sau chirurg.

Medical Express vă pune la dispoziție dispozitivul medical "no touch" **Swing-Band®** prin **decontarea integrală prin sistemul asigurărilor de sănătate.**

**Avantajul major pentru dumneavoastră îl reprezintă faptul că în 48 de ore de la intervenția chirurgicală puteți pleca acasă complet refăcută.**

### Gama "Swing System"

**Swing system evolution** cuprinde o gama completa de implanturi destinate chirurgiei pe cale vaginala.

**Swing system evolution** reprezinta implanturi cu structura mixta, cu ochiuri rectangulare, obtinute din monofilamente de polipropilena impregnate cu poliuretan.

Aceste mese din polipropilena, *cele mai usoare existente pe piata*, sunt supuse unui *tratament specific si exclusiv pentru o biostabilitate perfecta.*



- **“No-Touch” SWING BAND**  
Indicatii: incontinența urinară de efort
- **“Tension-Free” CISTO SWING**  
Indicatii: cistocel, ptosis al vezicii urinare, prolaps de perete anterior
- **“Tension-Free” RECTO SWING**  
Indicatii: rectocel, histerocel, prolaps vaginal

## C) Catetere urinare-Produse » Retenție urinară

### Conveen Coloplast: cateterele EasiCath

**Autocateterizarea intermitentă** înseamnă inserția cateterului în vezica urinară pentru golirea acesteia, ori de câte ori este necesar, scoaterea ulterioară a cateterului permițând pacientului libertate de mișcare și un confort sporit.

### EasiCath cu conector Luer

**Cateterul EasiCath** este disponibil și în varianta cu **conector Luer** în locul sistemului de conectare standard.

Aceasta permite folosirea unei seringi pentru că tratamentele aplicate vezicii urinare să poată fi făcute în siguranță. Seringă poate fi conectată înainte sau după introducerea cateterului în vezica urinară.

